

5

ERSTVERWENDUNG UND EINSATZ

Bitte vor dem Befüllen der Abformung darauf achten, dass eine geringe Menge des provisorischen K&B-Materials ausgetragen wird, um ein korrektes Mischungsverhältnis zu gewährleisten.



Beim erstmaligen Aktivieren der Kartusche muss sichergestellt werden, dass **beide Komponenten gleichzeitig austreten**.



6

BEFÜLLEN DER ABFORMUNG

I. **Visalys® Temp** wird in die Abformung gefüllt. Die Menge des Materials sollte den Zahnfleischsaum nicht überschreiten.

II. Überschüsse können vorsichtig entfernt werden.



Das Material vom Boden aus befüllen und mit der Spitze der Mischkanüle im Material bleiben, um **Lufteinschlüsse zu vermeiden**.



7

ENTNAHME DES PROVISORIUMS


Wird direkt im Anschluss eine Präzisionsabformung genommen, so ist darauf zu achten, dass die Schmierschicht vollständig von den Zähnen entfernt wird. Andernfalls kann die Abbindung des Abformmaterials beeinträchtigt werden.

I. Verbleibt das Provisorium bei der Entnahme der Abformung auf den Zähnen, so sollte es entnommen und bis zur finalen Aushärtung in die Abformung reponiert werden.

II. Situation nach der Entformung.



Bei minimalinvasiven Präparationen sind die Provisorien oft sehr dünnwandig. Einfach an entsprechender Stelle vor Entfernen der Inhibitionsschicht das Provisorium mit **Visalys® Temp** verstärken. Kein Bonding etc. notwendig.

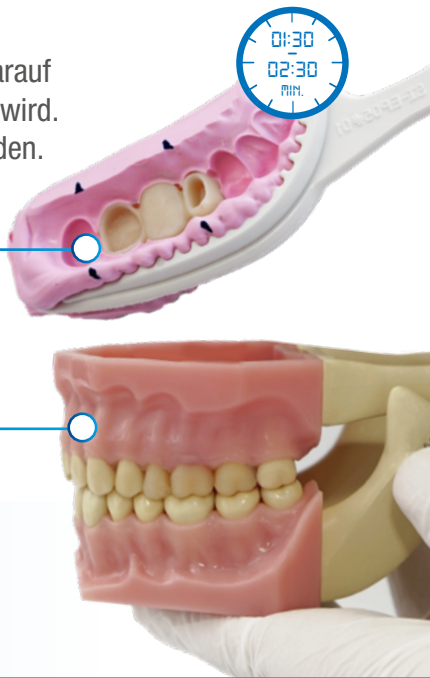

8

AUSARBEITUNG

- I. Entfernung der Schmierschicht (Inhibitionsschicht) mit alkoholhaltigem Tuch.
- II. Kontaktpunkte und Präparationsgrenze mit Bleistift kennzeichnen. Diese müssen beim Fräsen bestehen bleiben.
- III. Grobe Überschüsse werden mit einer größeren Fräse entfernt. Dabei ist zu beachten, den Kontakt zu den natürlichen Nachbarzähnen zu erhalten.
- IV. Mit einer feinverzahnten Fräse arbeitet man sich in Richtung Kronenrand vor und achtet dabei auf eine dünn auslaufende Kronenrandgestaltung.
- V. Die Interdentalräume werden mit einer feinen Fräse ausgearbeitet, um Platz für die Papillen zu schaffen.




9

AUSARBEITUNG UND POLITUR

- I. Zum Ausarbeiten von Feinheiten und Glätten der Oberfläche wird eine feine Finierscheibe verwendet. Sie ermöglicht ein leichtes Ausarbeiten an unzugänglichen Stellen.
- II. Abschließend erzeugt ein Baumwollschwabbel den Hochglanz auf dem Provisorium. Je glatter die Oberfläche auspoliert wird, desto weniger Plaque kann anhaften.



Vor dem Einsetzen des Provisoriums **Passung, Randschluss und Okklusion überprüfen**.

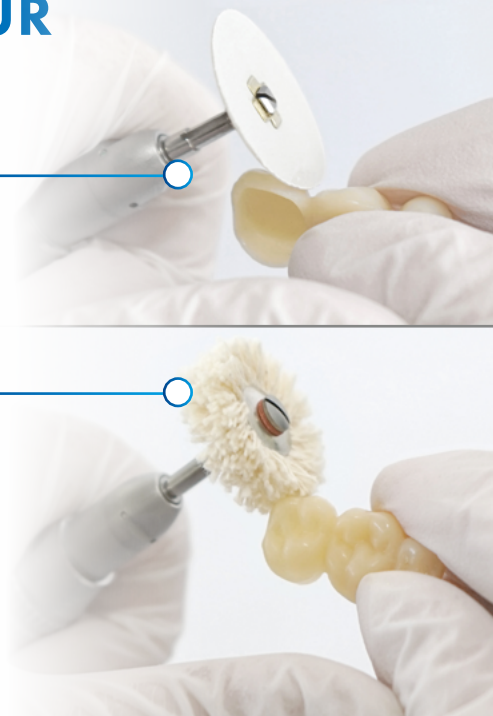

VISALYS® TEMP –
DAS SORTIMENT

SILGINAT® –
DAS SORTIMENT



	Visalys® Temp
Normal pack	50-ml-Kartusche (Farben: A1, A2, A3), 15x Mischkanülen blau-orange
Bonus pack	5 x 50-ml-Kartusche (Farben: A2, A3), 15x Mischkanülen blau-orange



	Silginat®
Refill pack	2 x 380-ml-Kartusche