




EFFIZIENT ABFORMEN – **SILGINAT®**

A-SILIKON ZUR SITUATIONSABFORMUNG

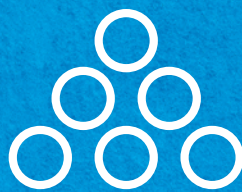

KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

SILGINAT® – EINFACH, SCHNELL, EFFIZIENT!

Situationsabformung

Silginat® ist ein Alginat-Ersatzmaterial auf A-Silikon Basis speziell für **Alginat-Anwendungen**.









INDIKATIONEN

- **Situationsabformungen**
- **Gegenkieferabformungen**
- **Abformungen für die Erstellung provisorischer Kronen und Brücken**
- **Abformungen zur Erstellung einfacher herausnehmbarer prothetischer Versorgungen**
- **Abformungen zur Schienenerstellung**
- **Kieferorthopädische Abformungen**
- **Abformungen für Fallstudienmodelle**



Technische Daten

 Verarbeitungszeit bei 23 °C ≤	 Mundverweildauer bei 35°C ≥	 Abbindeende* ≥	 Rückstellung nach Verformung (ca.) %	 Lineare Maßänderung (max.) %	 Shore-Härte (ca.)
90 Sek.	90 Sek.	3:00 Min.	99,5	-0,20	A 45

* Gesamtabbindezeit (Entfernung aus dem Mund) von Beginn der Mischung

TYPISCH A-SILIKON



- Lager- und dimensionsstabil,
hohe Präzision

Silginat vs. Alginat
ca. 24 Std. nach Abformnahme



HANDLINGSVORTEIL



- Sauberes und schnelles Arbeiten dank der 5:1
Großkartusche mit beliebig oft reproduzierbaren Ergebnissen



PREISWERTES ABFORMEN

- Mehrfach ausgießbar, nur noch eine
Situationsabformung pro Patient notwendig



FÜR NOCH MEHR EFFIZIENZ!

Zeitgewinn und Entlastung bei vielen Arbeitsschritten.

SILGINAT® – DAS SORTIMENT

Silginat®

Refill pack

2 x 380-ml-Kartusche

REF 14713

Zubehör

Dynamische Mischer weiß

45 Stück

REF 17900



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefon +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.de



012737_3525


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent